クリア レンズ洗浄機

ULTRASONIC CONTACTLENS CLEANER



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意



· 取扱説明書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。
任意の使用による事故は補償を受けられません。
· 湿気やほこりの多い環境では使用しないでください。
· 製品が破損している場合は絶対に使用しないでください。
· 製品に無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。



· 絶対に分解・改造・組み立てをしないでください。分解・改造による故障はお客様の過失となり、修理ができない場合や有償修理となる場合があります。



· 本製品は、身体・感覚・知的能力が低下している方や、経験・知識が不足し、監督や指示なしに安全に使用できない方（お子様を含む）の使用を想定していません。
· お子様が製品で遊ばないよう、監督してください。
· 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで
使用してください。
· 使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。
· 包装のビニールは窒息の危険があります。お子様の手の届かない所に置いてください。



· ケーブルや充電端子が破損している場合は絶対に使用しないでください。
· 製品の定格に合った電源に接続してください。
· ケーブルを無理に曲げたり、束ねた状態で使用しないでください。
· ケーブルを外すときは、ケーブルを引っ張らないでください。

安全上のご注意



· 本製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。

· できるだけ水の近くでの使用は避け、浴槽、洗面台、シンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置かないでください。

· 使用後は必ず電源を切り、水がかからない場所に保管してください。

· 濡れた手で使用しないでください。感電・火災の原因になります。



· お手入れの際は化学薬品を使わず、湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。



· 使用しないときは必ず電源を切ってください。

· 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。

· 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

· 平らな場所に保管し、高い場所での保管は避けてください。

· 長期間使用しないと変色することがあります。使用後はきれいに拭いて保管してください。

· 使用・保管の際は、暖房器具（ラジエーター、ストーブなど熱を発生させる機器）から離してください。



· 寿命を迎えた製品は、自治体指定の回収場所に分別して出してください。


· パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。

※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


同梱品



本体

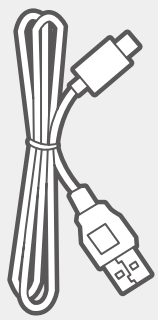

USB-Cケーブル

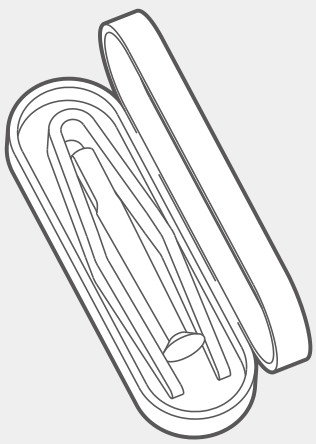


レンズピンセット、吸引ステ
ピンセット／スティックケース



取扱説明書

各部の名称

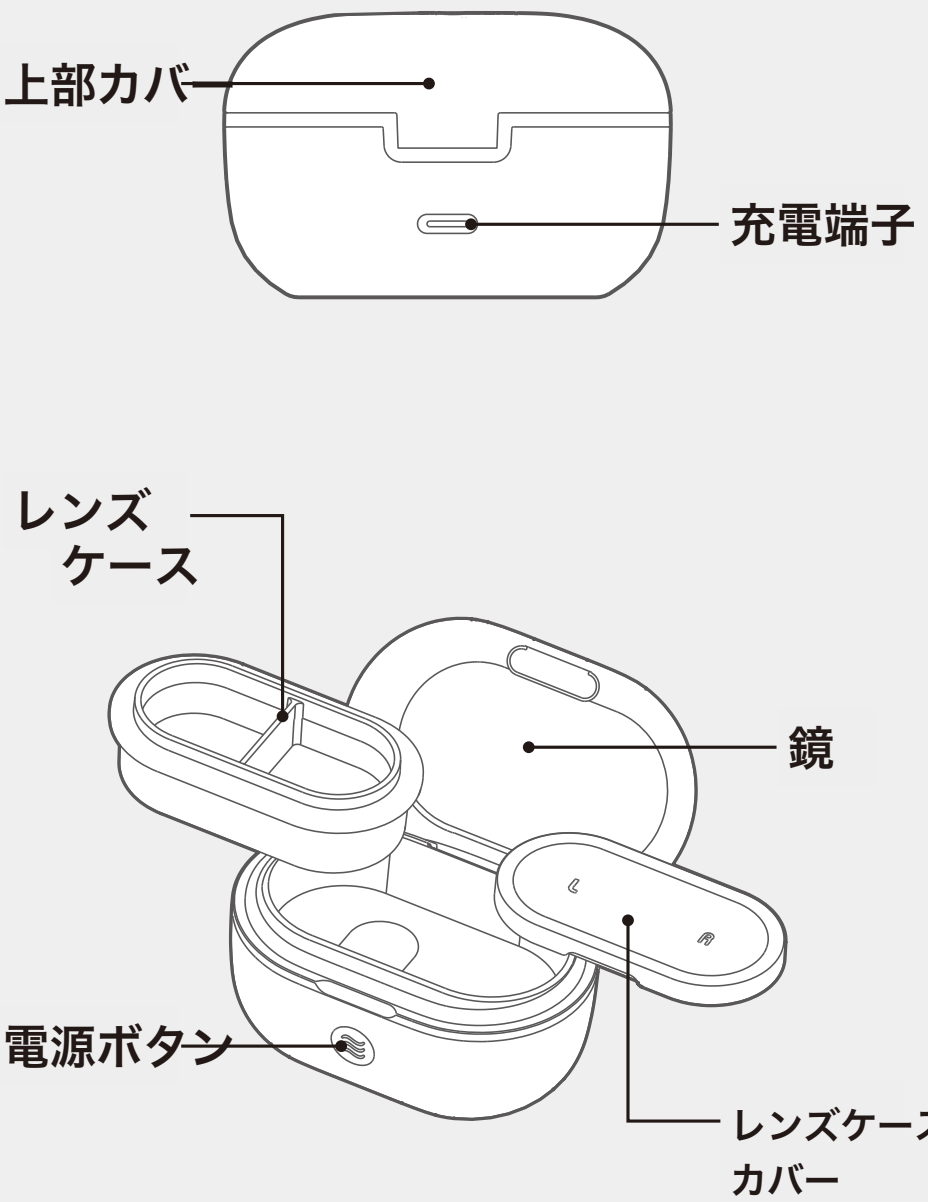

使い方

· 上部カバーを開け、レンズケースのカバーを開けてください。
· 使用したレンズをレンズケースに入れてください。
· レンズケースにMAX表示を超えないように洗浄液を入れてください。
· レンズケースのカバーを閉じ、上部カバーを閉じてください。
· 電源ボタンを2回タッチすると電源が入り、3分間動作します。
· 動作中に電源ボタンを2回タッチすると電源が切れます。

※ レンズは左右を分けて入れてください。
※ 洗浄液が漏れないよう、レンズケースのカバーをしっかり閉じて使用してください。

充電方法

· 充電端子のゴムカバーを開けてください。
※ ゴムカバーは取り外せません。破れないようご注意ください。

· 付属のUSB-Cケーブルを充電器に接続し、充電ポートに接続してください。

· 充電中は赤色LEDが点滅します。

· 充電が完了すると赤色LEDが消灯します。

· 充電時間：1時間30分

※ 本製品の定格は「5V、1A」です。定格に合ったアダプターを使用してください。

お手入れ方法

· 本体からレンズケースを外してください。

· レンズケースとカバーを水で洗ってください。

· 洗浄後は水気を切り、涼しい場所で完全に乾かしてから逆の順序で組み立ててください。

· 本体の汚れは少し湿らせた布で軽く拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

· お手入れ後は涼しい場所で自然乾燥させてください。

※ 化学薬品などで製品を洗わないでください。

製品仕様

製品名	oa クリア レンズ洗浄機
モデル名	OUSC-001IV
定格	DC 5V, 1A / 2W
電池容量	DC 3.7V, 150mAh, 0.555Wh
サイズ	63 × 42 × 40 (mm)
重量	63g
同梱品	本体、レンズピンセット、吸引スティック、ピンセット／スティックケース、 USB-Cケーブル、取扱説明書

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OUSC-001IV_クリアレンズ洗浄機_取扱説明書_JP_V1